



The
step-by-step
solution

Operating and
Information
Manual.



Evacusafe

Ifinovădori | manufacturing | training

Děkujeme vám za zakoupení evakuačního vybavení. Před zahájením provozu zařízení věnujte prosím čas přečtení obsahu této brožury.

OBSAH

- Obecné informace
- Informace o záruce a záručních podmínkách
- Kontrolní seznam vizuální kontroly
- Srovnávací grafy funkcí
- Specifikace zařízení
- Rozměry pro montáž na stěnu
- Návod k obsluze zařízení

OBECNÉ INFORMACE

Pokud jste se pro certifikované školení nerozhodli, zde je několik dalších bodů, které je třeba zvážit ve spojení s vašimi stávajícími havarijními plány.

KDO BUDE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT?

KDE BUDE ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNO? KDE JE NEJBLIŽŠÍ VHODNÝ

NOUZOVÝ POŽÁRNÍ VÝCHOD?

MÁME DOSTATEK VYBAVENÍ PRO VŠECHNY SITUACE?

Pokud máte budoucí požadavky na školení, navštivte prosím: www.evacusafe.co.uk.
nebo volejte 01256 33 27 23

ZÁRUKA A ZÁRUKA

Společnost Evacusaft UK Limited poskytuje následující záruky na vadné zpracování nebo materiály:

Pásové evakuační židle - 2 roky na všechny pracovní části; 6 let na pásy a rám židle; tranzitní

židle - 1 rok na všechny části;

Matrace Evacuslider - 1 rok na všechny díly;

Záruka se vztahuje na díly, které podléhají běžnému opotřebení, n a poškození způsobená vandalismem, nesprávným používáním nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na následné náklady vzniklé v důsledku odstranění závady, z e j m é n a na náklady na dopravu a cestu, ztrátu výdělku, výdaje atd.

Společnost Evacusaft doporučuje po šesti letech provést automatickou obnovu pásů, aby se napomohlo udržení provozuschopného stavu vašeho zařízení.

VIZUÁLNÍ KONTROLA

Zařízení Evacusaft je navrženo tak, aby bylo nenáročné na údržbu, ale mělo by se pravidelně kontrolovat a používat, aby se prodloužila jeho životnost.

Vizuální kontroly, které by měly být provedeny, zahrnují:

- Všechny matice a šrouby jsou zajištěny
- Bezpečnostní pásy/podpěry fungují správně
- Uzamykací mechanismy se snadno otevírají, zavírají a zajišťují
- Hladké otevírání kolejových mechanismů
- Pryžové pásy se volně otáčejí kolem vodiček

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ZÁVAD JE TŘEBA ZAŘÍZENÍ VYŘADIT Z PROVOZU A KONTAKTOVAT SPOLEČNOST EVACUSAFE NA TELEFONNÍM ČÍSLE **01256 332723**.

V kombinaci s kontrolním seznamem pro vizuální kontrolu můžeme provést úplný a komplexní servis křesla Evacusaft, abychom zajistili jeho nejlepší provozní stav.

S každou službou EvacuService získáte:

- Kvalifikovaní servisní technici Evacusaft
- Komplexní servisní prohlídka
- Výměna vadných dílů (v rámci standardních záručních podmínek).
- Podrobná zpráva o smluvním servisu pro vaše záznamy

Srovnání funkcí - Evakuační židle


	Židle Excel	Standardní židle	4kolová tranzitní židle
Jeden operátor	✓	✓	
Bezpečnostní brzdy	✓	✓	
Lehké	✓	✓	✓
Pohodlné sezení	✓	✓	✓
Minimální ruční manipulace	✓	✓	
Použití na 4 kolech na úrovni terénu	✓	✓	✓
Jednoduché nastavení a použití	✓	✓	✓
Podpěry ramen	✓	✓	
Vyměnitelné sedadlo a opěrka hlavy	✓	✓	
Postroj s plnou hrudní oporou	✓		
Sledované stránky	✓	✓	
Podpůrný popruh na nohy	✓		
Uzamykací mechanismy s červeným kódem	✓		
Bederní bezpečnostní pás		✓	✓
Zvedací rukojeti	✓		✓
Prachový kryt	✓	✓	✓
Háčky a značení	✓	✓	✓
Dostupné balíčky školení	✓	✓	✓

Specifikace - Evakuační židle

	Židle Excel	Standardní židle	4kolová tranzitní židle
Ve složeném			
stavu v cm	113	112	83
Výška	29	15	26
Hloubka	65	54	52
Šířka			
V rozloženém stavu v cm			
Výška	143	146	93
Hloubka	99	70	92
Šířka	65	54	52
Hmotnost židle KG	13.8	12.5	9.6
Maximální pracovní zatížení KG	182	150	110

Poznámka: Ramena modelu Excel jsou nosná pouze do maximální hmotnosti 100 kg.

POKYNY PRO MONTÁŽ NA STĚNU.

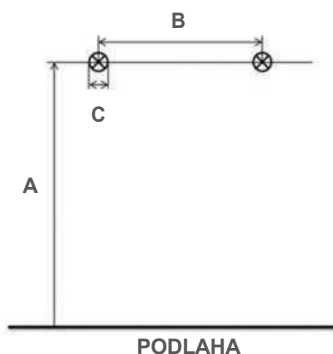

	Židle Excel	Standardní židle	Transit na 4 kolech
A - Výška od podlahy (mm)	700	800	800
B - Vzdálenost mezi otvory (mm)	265	260	250
C - Rozměr otvoru (mm)	7	7	7
Navrhovaná hloubka otvoru (mm)	55	55	55

Upozornění: Dodávané hmoždinky jsou určeny pouze pro pevné stěny. V případě montáže na dutou stěnu se ujistěte, že máte správné upevňovací prvky.

Židle Standard a Excel by měly být zavěšeny na příčce dráhy, nikoli na madle. Tím se zajistí správné uchycení ochranného krytu.

Evakuační židle Excel

NÁVOD K OBSLUZE: Pro otevření židle k použití:



1. Křeslo by mělo být umístěno v blízkosti východu, kterému slouží. Měla by být zavěšena na dodaných háčcích nebo může být opřena o zeď.



2. Odstraňte ochranný kryt a položte židli na zem do vhodné polohy.



3. Brzdový mechanismus zapnete stisknutím červené nášlapné podložky zobrazené na obrázku.



4. Uvolněte opěrný popruh, otevřete židli ze strany do polohy k sezení pomocí černé rukojeti a poté se ujistěte, že je zajištěna na místě zatlačením na tyč se dvěma červenými zámkami.



5. Otevřete opěrku nohou.



6. Přemístěte klienta do křesla podle osobního evakuačního plánu (peep), připevněte podpůrný postroj a přeneste jej přes ruce.



OVLÁDÁNÍ KŘESLA

7. Jakmile klient sedí v křesle, uvolněte brzdový mechanismus tak, že položíte nohu na červenou podložku a zatlačíte na ni.



8. K nouzovému východu se vydejte s rukama v tlačné poloze na rukojeti.



9. Po nasazení otevřete dvě červené pružinové svorky. Tím se rukojeť zvedne. Po zvednutí zavřete obě červené pružinové svorky a ujistěte se, že se znovu zajistily, čímž se rukojeť zajistí na místě.



10. Přeneste ruce z tlačné polohy po stranách na horní část rukojeti. Umístěte nohu na zelenou montážní tyč dráhy a opřete židli o páku.



11. Přemístěte židli dopředu na dva horní schody a dbejte na to, aby se kolejnice plně dotýkaly schodů.



12. Chcete-li židli spustit dolů, zatlačte rukojeť směrem k nohám, čímž zajistíte plynulý a kontrolovaný sestup.



13. Jakmile dorazíte na odpočívadlo, vraťte židli na čtyři kola a přejděte na další schodiště. Jakmile se dostanete do přízemí, manévrujte k poslednímu východu.

PRO NÁVRAT DO SKLADOVACÍ POLOHY -



14. Zkontrolujte, zda je brzdový mechanismus zablokován.



15. Uvolněte červené pružinové spony na rukojeti a opatrně je spusťte, zavřete červené pružinové spony a zvedněte rukojeť, dokud nezapadne na místo. Podpěrný postroj protáhnete skrz a přes rukojeť.



16. Sklopte područky dozadu a zavřete židli z boku uvolněním červeného zajišťovacího mechanismu na kolejnici, zatlačte dopředu z horní rukojeti a složte židli k sobě.



17. Spodní část podpůrného postroje protáhněte opěrkou nohou a připojte k hornímu postroji. Umístěte židli zpět do úložného prostoru a nasadte ochranný kryt.

Standardní evakuační židle

NÁVOD K OBSLUZE: Pro otevření židle k použití:



1. Křeslo by mělo být umístěno v blízkosti východu, kterému slouží. Měla by být zavěšena na dodaných háčcích nebo může být opřena o zeď.



2. Odstraňte židli ze zdi a položte ji na zem. Zapněte nožní brzdy sešlápnutím nožních pedálů na OBOU brzdách zobrazených na obrázku.



3. Stisknutím červeného tlačítka na bezpečnostním pásu jej uvolněte.



4. Držte se horní části židle a zatáhněte z a sedadlo. Jakmile je židle otevřená, přetáhněte obě područky. **UPOZORNĚNÍ** Uvědomte si, že područky **NENOSÍ VÁHU** a měly by být sklopeny před tím, než uživatel/klient opustí židli.



5. Vytáhněte obě pružinové svorky. Tím se horní rukojeť zvedne.



6. Zavřete pružinové svorky a ujistěte se, že se znovu zasunuly, čímž se rukojeť zajistí na svém místě.



7. Vytáhněte dvě pružinové svorky umístěné v zadní části židle mezi kolejnicemi.



8. Zatáhněte kolejnici dozadu, přitáhněte příčník k sobě nebo nahoru a zavřete pružinové svorky. Zatlačením na kolejnicovou jednotku se ujistěte, že se opět spojily.



9. Jakmile je židle na schodišti, lze všechny nerovnosti, lišty nebo chrániče schodů překonat položením nohy na tyč, jak je znázorněno na obrázku.



10. Ruce nyní položte na horní část madla, nakloňte židli dozadu a manévrojte přes okraj schodů.



11. Držte kolejnice pevně v kontaktu se schody, zajistěte pevné uchopení, zatlačte na rukojeť směrem dolů a nechte židli pohybovat směrem dolů.



12. Jakmile se dostanete na odpočívadlo, vraťte židli na čtyři kola a p ř e j d ě t e na další schodiště.

PRO VRÁČENÍ ŽIDLE DO ÚLOŽNÉ POLOHY -



1. Zkontrolujte, zda je nožní brzda zablokovaná. 2. Uvolněte pružinové svorky na kolejnici, zavřete



a uzamknout.



3. Uvolněte pružinové svorky na rukojeti, spusťte je, zavřete svorky a zvednutím je zajistěte.



4. Odklopte ramena. Zavřete židli a zapněte bezpečnostní pás.



6. Položte židli zpět do úložného prostoru a nasadte ochranný kryt.

4kolová tranzitní židle

VAROVÁNÍ - ŽIDLE JE URČENA K PŘEPRAVĚ OSOB, NESMÍ BÝT PONECHÁNA BEZ DOZORU, JINAK SE MŮŽE PŘEVŘÁTIT A ZRANIT CESTUJÍCÍ.

DOPORUČUJE SE, ABY VŠICHNI UŽIVATELÉ ŽIDLE ABSOLVOVALI ŠKOLENÍ O RUČNÍ MANIPULACI. K OBSLUZE KŘESLA JSOU ZAPOTŘEBÍ MINIMÁLNĚ DVĚ OSOBY.

NÁVOD K OBSLUZE



1. Vyjměte židli z místa uložení a položte ji na zem do vhodné polohy.



2. Odepněte bezpečnostní pás.



3. Rozložte rukojeť a na každé straně zasuňte bezpečnostní kolíky, abyste ji zajistili.



4. Držte rukojeť a umístěte tyč sedadla do držáku na zadním rámu.



5. Přemístěte osobu na sedadlo podle osobního evakuačního plánu (peep) a zajistěte, aby byla židle podepřena.



6. V případě potřeby odklopte opěrku nohou a zapněte bezpečnostní pás.



7. Po vstupu na schody by 1 osoba měla držet rukojeť v zadní části židle a 1 nebo 2 osoby by měly držet zvedací rukojeti ve spodní části židle.



8. 1 osoba by měla převzít velení a dávat pokyny ke zvedání. Pomalu a jistě manévrujte se židlí po schodech dolů.



9. Jakmile se ocitnete na schodišti, spusťte židli do statické polohy a připravte se na další schodiště.



10. Až se dostanete do přízemí, vymanévrujte k poslednímu východu.

PRO NÁVRAT DO SKLADOVACÍ POLOHY -



1. Sklopte opěrku nohou do zavřené polohy.



2. Držte rukojeť a vyjměte tyč sedadla z držáku na zadním rámu.



3. Odstraňte bezpečnostní kolíky na obou stranách rukojetí a sklopte rukojeť dolů.



4. Spusťte se na zem do složené polohy.



5. Připevněte bezpečnostní pás kolem složené židle.



6. Návrat do skladovací polohy.

KŘESLO LZE OVLÁDAT POMOCÍ 2, 3 NEBO 4 OSOB, KTERÉ JSOU ROZMÍSTĚNY KOLEM KŘESLA.

Porovnání funkcí - Evaculiders

	Premium Plus	Nastavitelný Premium	Standardní
Podpora hlavy a krku	✓	✓	✓
Bezpečnostní pásy	✓	✓	✓
Základna pro těžké nasazení	✓	✓	✓
Koncové podpůrné popruhy pro hlavu a nohy	✓	✓	✓
Koncové podpůrné popruhy pro hlavu a nohy s proměnlivou délkou	✓		
Sekundární rukojeť pro přenášení	✓	✓	
Kapsa na nohy	✓	✓	✓
Plně nastavitelné	✓	✓	
Polstrovaná opěrná základna	✓	✓	✓
Úložná taška	✓	✓	✓
Nástěnné háčky	✓	✓	✓
Dostupné balíčky školení	✓	✓	✓

Evakuační jezdce

UPOZORNĚNÍ - EVAKUAČNÍ VOZÍK JE URČEN PRO PŘESUN OSOB. PO POUŽITÍ NESMÍ ZŮSTAT BEZ DOZORU.

DOPORUČUJE SE, ABY VŠICHNI UŽIVATELÉ JEZDCE ABSOLVOVALI ŠKOLENÍ O RUČNÍ MANIPULACI.

K OBSLUZE EVAKUAČNÍHO VOZÍKU JSOU ZAPOTŘEBÍ MINIMÁLNĚ DVĚ OSOBY.



STANDARDNI EVAKUACNI JEZDEC

Specifikace:

Maximální pracovní zatížení	120 kg
Délka (provozní)	190 cm
Hloubka (provozní)	40 cm
Šířka (provozní)	60 cm
Hmotnost vozíku Evaculider	5 kg
Rozměry balení	65 cm x 62 cm x 17 cm



PRÉMIOVÝ NASTAVITELNÝ EVACUSLIDER

Specifikace:

Maximální pracovní zatížení	120 kg
Délka (provozní)	195 cm
Hloubka (provozní)	50 cm
Šířka (provozní)	65 cm
Hmotnost vozíku Evaculider	5,5 kg
Rozměry balení	75 cm x 67 cm x 25 cm



PREMIUM PLUS EVACUSLIDER

Specifikace:

Maximální pracovní zatížení	182 kg
Délka (provozní)	200 cm
Hloubka (provozní)	50 cm
Šířka (provozní)	75 cm
Hmotnost vozíku Evaculider	5,5 kg
Rozměry balení	60 cm x 75 cm x 90 cm

Evacuslider

NÁVOD K OBSLUZE: Děkujeme, že jste si zakoupili Evacusafe Evacuslider, před použitím si prosím přečtěte následující pokyny.



1. Vyjměte zařízení Evacuslider z úložného vaku.



2. Položte na zem, rozložte a odepněte rychloupínací popruhy, pokud používáte prémiovou nastavitelnou polohu jezdce, rychloupínací popruh, opěrku hlavy a kapsu na nohy.



3. Umístěte klienta na Evacuslider podle osobního plánu nouzové evakuace (PEEP).



4. Upevněte všechny rychloupínací popruhy a zajistěte, aby byl klient na vozíku Evacuslider zajištěn, v případě použití nastavitelného vozíku Premium nebo vozíku Premium plus zajistěte hlavu klienta, pokud je to nutné.



5. Přesun na výstupní trasu s využitím doporučených 2 operátorů na čelním konci evakuačního vozíku.



6. Jakmile se dostanete na schody, postavte jednu osobu dozadu a jednu osobu dopředu a držte se madel.



7. Manévrovejte s Evacusliderem pomalu a jistě po schodech dolů.



8. Jakmile se ocitnete na schodišti, spusťte Evacuslider do statické polohy a připravte se na další schodiště.



9. Jakmile se ocitnete v přízemí, evakuujte se ke konečnému východu.

Poznámka: Pokud používáte nastavitelný jezdec Premium Plus nebo Premium, může být zapotřebí více asistentů.



Evakuace"

inovace | výroba | školení

UUKK OOffffiiiccee 011256633227233
Ffoox001122556633322882233
iinnffoo@@@eevvaaccuussaaffee.ccoo.uukk
www..eevvaaccuussaaffee..cco..uukk

Unit 99 Devcomshire Business Park
Knights Park Road,
Basingstoke RG22 1 6XNN

EECCDD0011 Sept 18/22